

F

Pour tout conseil, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

## PRÉSENTATION :

Parfait respect morphologique grâce au tricotage tridimensionnel. Sangle de rappel et de maintien auto agrippante pour ajuster la contention. Confort exceptionnel obtenu par la mise en œuvre d'une zone souple sur le coup de pied (A) et d'une zone allégée au niveau du talon (B).  
Coloris noir.



## COMPOSITION :

Polyamide, polyester, élasthanne.

## INDICATIONS :

Entorse moyenne, instabilité ligamentaire sévère, séquelle d'entorse, reprise d'activités.

Taille	1	2	3	4	5
Tour de cheville <sup>(1)</sup> (cm)	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28
Code ACL	969 855 1	969 856 8	969 857 4	969 858 0	969 859 7
Code CNK	2674-083	2674-075	2674-067	2674-059	2674-042

(1) Mesurer le tour de cheville 5 cm au-dessus des malléoles.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas mettre la chevillère sur une peau lésée. Eviter de mettre en contact avec de la pommade. Ne pas utiliser en cas d'entorse grave de la cheville. En cas d'inconfort, relâcher légèrement la sangle auto-agrippante.

## ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30° avec un savon neutre. Essorer par pression, sécher à plat à température ambiante.



## MODE D'EMPLOI :

- Mesurer le tour de cheville 5 cm au-dessus des malléoles.
- Enfiler la chevillère en tirant sur le bord supérieur en positionnant bien le talon.

- Appliquer la sangle sur l'auto-agrippant.
- Enrouler par l'inférieur sous le pied.
- 4 Faire passer sur le coup de pied en enroulant au niveau du tendon d'Achille.
- 5 Repasser sur le coup de pied et fixer la sangle sur elle-même en l'ajustant selon la contention souhaitée.

Vente exclusive en pharmacie.

Semes S.A.  
B.P. 70103 - 54183 HEILLECOURT - FRANCE  
Fabriqué en France



V1 - Février 2010

D

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## DARREICHUNGSFORM:

Perfekte Anpassung an die Morphologie mit dreidimensionalem Gestrick. Außergewöhnlicher Komfort durch Elastikbereich auf dem Spann (A) und dünnerem Bereich an der Ferse (B).

## ZUSAMMENSETZUNG:

Polyamid, Polyester, Elasthan.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

Mittlere Verstauchung, schwere Bänderinstabilität, Folgen von Verstauchungen, Wiederaufnahme der Berufstätigkeit.



Größe	1	2	3	4	5
Knöchelumfang <sup>(1)</sup> (cm)	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28
ACL-Code	969 855 1	969 856 8	969 857 4	969 858 0	969 859 7
CNK-Code	2674-083	2674-075	2674-067	2674-059	2674-042


(1) Den Knöchelumfang 5 cm oberhalb der Knöchel messen.

## VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH:

Die Fußgelenkbandage nicht auf die verletzte Haut legen. Den Kontakt mit der Pommade vermeiden. Bei schweren Verstauchungen des Knöchels nicht verwenden. Bei Schmerzempfindung den selbsthaftenden Gurt etwas lockern.

## PFLEGE:

Bei 30°C mit neutraler Seife von Hand waschen. Ausdrücken, bei Raumtemperatur flach liegend trocknen.

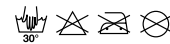

## ANWENDUNG:

- Den Knöchelumfang 5 cm über den Knöcheln messen.
- Die Fußgelenkbandage anlegen, indem Sie am Oberrand ziehen und die Ferse in die richtige Position bringen.
- 1 Den Gurt mit dem selbsthaftenden Teil verbinden.
- 2 Von innen unter den Fuß rollen.
- 3/4 Über den Spann in Höhe der Achillessehne abrollen.
- 5 Wieder über den Spann legen und den Gurt unter Anpassung an die gewünschte Kompression auf sich selbst befestigen.



NL

Stel uw vragen aan uw arts of apotheker.

## PRESENTATIEVORM:

De morfologie wordt perfect gerespecteerd dankzij het in drie richtingen rekbaar elastisch weefsel. Deriemmet klittenband dient voor het vasttrekken en vasthouden om zo de contentie te aan te passen. Hij is uitzonderlijk comfortabel dankzij een soepele zone op de wreef (A) en een lichte zone ter hoogte van de hiel (B).

## SAMENSTELLING:

Polyamide, polyester, elastan.

## INDICATIES:

matig ernstige verstuiking, ernstige ligamentaire instabiliteit, nasleep van een verstuiking, het hervatten van de activiteiten.



Maat	1	2	3	4	5
Enkelomtrek <sup>(1)</sup> (cm)	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28
ACL-Code	969 855 1	969 856 8	969 857 4	969 858 0	969 859 7
CNK-Code	2674-083	2674-075	2674-067	2674-059	2674-042

(1) Meet de enkelomtrek 5 cm boven de enkel.

## VOORZORGSMAATREGELEN:

Drag het enkelverband niet op een beschadigde huid. Vermijd het contact met een pommade. Nietgebruiken bij een zware enkelverstuiking. Maak de riemmet klittenband een beetje los als het enkelverband niet comfortabel aanvoelt.

## ONDERHOUD:

Was met de hand op 30° met een neutrale zeep. Drukken om uit te wringen, plat drogen bij omgevingstemperatuur.



## GEBRUIKSAANWIJZING:

- Meet de enkelomtrek 5 cm boven de enkel.
- Trek het enkelverband aan door aan de bovenrand trekken, en zorg dat de hiel goed zit.
- 1 Leg deriemop deklittenband.
- 2 Draaide riem langs binnen onder de voet.
- 3/4 Draai hem over de wreef ter hoogte van de achillespees.
- 5 Breng hem terug over de wreef, maak de riemvast, en regel de contentie naar wens.

