

Genouillère de contention

marqueverte

marqueverte

marqueverte

F

Pour tout conseil, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

PRÉSENTATION :

Parfait respect morphologique grâce au tricotage tridimensionnel. Confort exceptionnel obtenu par la mise en œuvre d'une zone allégeant la pression sur le plateau rotulien (A) et d'une zone souple et aérée au niveau du creux poplité (B) évitant les plis et la stagnation de l'humidité. Report de la couture d'assemblage sur le côté pour éviter toute irritation. Coloris noir.

MODE D'EMPLOI :

- Mesurer le tour du genou au niveau de la rotule en fléchissant le genou à 20°.
- Enfiler la genouillère en tirant sur le bord supérieur en la centrant correctement.



COMPOSITION :

Polyamide, polyester, élasthanne.

INDICATIONS :

Maintien articulaire, douleur suite à une faiblesse ligamentaire, hématomes, arthrose, reprise d'activités.

Taille	1	2	3	4	5
Tour de cuisse ⁽¹⁾ (cm)	35/38	39/42	43/46	47/50	51/56
Tour de genou ⁽²⁾ (cm)	30/32	33/35	36/38	39/42	43/48
Tour de mollet ⁽³⁾ (cm)	25/28	29/31	32/35	36/39	40/44
Code ACL	967 516 5	967 517 1	967 518 8	967 272 9	967 273 5
Code CNK	2674-372	2674-398	2674-406	2674-414	2674-422

- (1) Circonférence de la cuisse, 14 cm au dessus de la rotule.
 (2) Circonférence du genou au niveau de la rotule en fléchissant le genou à 20°.
 (3) Circonférence du mollet, 12 cm au dessous de la rotule.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas mettre la genouillère sur une peau lésée. Eviter de mettre en contact avec de la pommade. Ne pas utiliser en cas d'entorse grave du genou en phase aiguë.

ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30° avec un savon neutre. Essorer par pression, sécher à plat à température ambiante.



Vente exclusive en pharmacie.

Semes S.A.
 B.P. 70103 - 54183 HEILLECOURT - FRANCE
 Fabriqué en France



V1 - Février 2010

°partenaire santé

Kniestütze

D

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

DARREICHUNGSFORM:

Perfekte Anpassung an die Morphologie mit dreidimensionalem Gestrick. Außergewöhnlicher Komfort durch drucklindernden Bereich auf der Patella (A) und belüfteten Elastikbereich an der Kniekehle (B), der Hautfalten und Feuchtigkeitstagnation verhindert. Seitliche Anbringung der Naht, um jede Hautreizung zu vermeiden.

ANWENDUNG:

- Den Knieumfang in Höhe der Patella messen, dabei das Knie um 20° abbiegen.
- Die Kniebandage durch Ziehen am oberen Rand überstreifen und richtig zentrieren.



ZUSAMMENSETZUNG:

Polyamid, Polyester, Elasthan.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Gelenkstütze, Schmerzen aufgrund von Bänderschwäche, Hämatome, Arthrose, Wiederaufnahme der Berufstätigkeit.

Größe	1	2	3	4	5
Knieumfang ⁽¹⁾ (cm)	35/38	39/42	43/46	47/50	51/56
Schenkelumfang ⁽²⁾ (cm)	30/32	33/35	36/38	39/42	43/48
Wadenumfang ⁽³⁾ (cm)	25/28	29/31	32/35	36/39	40/44
ACL-Code	967 516 5	967 517 1	967 518 8	967 272 9	967 273 5
CNK-Code	2674-372	2674-398	2674-406	2674-414	2674-422


- (1) Schenkelumfang 14 cm über der Patella.
 (2) Knieumfang in Höhe der Kniescheibe bei Biegen des Knies um 20°.
 (3) Wadenumfang 12 cm unter der Patella.

VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH:

Die Kniebandage nicht auf die verletzte Haut legen. Den Kontakt mit der Pomade vermeiden. Bei schweren Knieverstauchungen in akuter Phase nicht verwenden.

PFLEGE:

Bei 30°C mit neutraler Seife von Hand waschen. Ausdrücken, bei Raumtemperatur flach liegend trocknen.

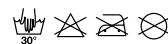

°partenaire santé

NL

Stel uw vragen aan uw arts of apotheker.

PRESENTATIEVORM:

De morfologie wordt perfect gerespecteerd dankzij het in drie richtingen rekbaar elastisch weefsel. Hij is uitzonderlijk comfortabel dankzij een zone die de druk op de knieschijf (A) verlicht, en een soepele en verluchte zone aan de achterkant van de knie (B) waardoor er geen plooiën zijn en het vocht niet stagneert. De naad zit aan de zijkant om irritatie te voorkomen.

GEbruiksaanwijzing:

- Meet de knieomtrek ter hoogte van het kogelgewicht door de knie 20° te plooiën.
- Trek het knieverband aan door aan de bovenrand trekken, en centreerdeze op de juiste manier.



SAMENSTELLING:

Polyamide, polyester, elastan

INDICATIES:

Ondersteuning van het gewricht, pijn door zwakke ligamenten, blauwe plekken, artrose, het hervatten van de activiteiten.

Maat	1	2	3	4	5
Knieomtrek ⁽¹⁾ (cm)	35/38	39/42	43/46	47/50	51/56
Dijomtrek ⁽²⁾ (cm)	30/32	33/35	36/38	39/42	43/48
Kuitomtrek ⁽³⁾ (cm)	25/28	29/31	32/35	36/39	40/44
ACL-code	967 516 5	967 517 1	967 518 8	967 272 9	967 273 5
CNK-code	2674-372	2674-398	2674-406	2674-414	2674-422


- (1) Omtrek van het dijbeen 14cm bovenhet kogelgewicht.
 (2) Omtrek van de knie ter hoogte van het kogelgewicht door de knie 20° te plooiën.
 (3) Omtrek van de kuit 12cm onder het kogelgewicht.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Draag het knieverband niet op een beschadigde huid. Vermijd het contact met een pommade. Niet gebruiken bij een zware verstuiking van de knie in de acute fase.

ONDERHOUD:

Was met de hand op 30° met een neutrale zeep. Drukken om uit te wringen, plat drogen bij omgevingstemperatuur.

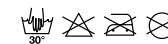

°partenaire santé